

iRest ■ ■ ■ ■

مینی
ماساژور SL-C56
MASSAGER



72F0206-C56

از این دستور العمل نگهداری کنید.

بابت خرید این محصول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. لطفاً به هشدارهای ایمنی توجه بیشتری نمایید و این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های آتی نگه داری کنید.
توجه: شرکت ما حق اصلاح و تغییر طراحی و توضیحات را بدون اعلان قبلی داراست. ارجاع محصول به رنگ واقعی است.

مفاد

۰۲	هشدارهای ایمنی مهم
۰۴	اسم محصول
۰۵	روش استفاده
۰۶	دستورالعمل اجرا
۰۸	دستورالعمل تمیزکردن محصول
۰۸	راه حل خرابی‌ها
۰۹	مشخصه محصول

⚠ هشدارهای ایمنی مهم

۱. هشدار ایمنی

لطفاً از محصول بر طبق این دفترچه راهنما استفاده کنید. دستگاه با کابل برق شارژ می‌شود، بعد جدا کرده و استفاده می‌کنیم، لطفاً اطمینان حاصل کنید که قدرت برق مناسب با این دستگاه می‌باشد اگر محفظه دستگاه و کابل برق دارای ایراد بود از این دستگاه استفاده نکنید. اجازه ندهید هیچ گونه جسم خارجی وارد فضای بین سری دستگاه و بدنه آن شود.

اجازه ندهید که آب وارد دستگاه شود تا از هرگونه سازه‌ای به دلیل جریانات مداری پیشگیری شود. لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیزکردن به منظور جلوگیری از هرگونه جراحت و یا خسارت برق دستگاه را قطع نمایید.

با دستان خیس به سیم برق و دو شاخه دست نزنید. هنگام کشیدن دو شاخه، سیم را نکشید و به سیم فشار زیاد وارد نکنید.

به سیم برق آسیب نرسانید و جریان مداری را تغییر ندهید. از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراحت نیبند. غیر از قطعات یدکی مجاز و توصیه شده از قطعه دیگری استفاده نشود.

دستگاه را در فضای بیرونی استفاده نکنید. به منظور جلوگیری از جراحت به دستگاه فشار زیاد وارد کنید.

تا ۱ ساعت پس از مصرف غذا از دستگاه استفاده نکنید. در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خودمشورت کنید. در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از دستگاه، با پزشک معالج خود مشورت کنید. این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و

راه حل خرابی‌ها

راه حل	علت محتمل	نوع نقص
پس از شارژ کردن استفاده کنید یا طبق دستورالعمل قفل سفر را باز کنید.	شارژر دستگاه کم است یا دستگاه در حالت قفل کودک است.	روشن نمی‌شود.
دوباره پس از شارژ کردن استفاده کنید.	شارژر دستگاه کم است یا زمان استفاده بیش از حدقیقه شده است	دستگاه درحین استفاده خاموش می‌شود.
	صدای طبیعی تولید شده توسط موتور	دستگاه صدای غیر عادی می‌دهد.

مشخصه محصول

مدل: SL-C56

نام: مینی ماساژور

ورودی آداپتور شارژر: 100-240V~ 50Hz/60Hz

خروجی آداپتور شارژر: 1.5V === 5.0V

میزان ولتاژ: 5V ===

میزان قدرت: 6W

مدت زمان کارکرد: 5 دقیقه

نوع باتری: باتری لیتیوم با گنجایش بالا



دستور العمل تمیز کردن

۱. روش تمیز کردن

برای تمیز کردن دستگاه از بنزین، تینر یا حلال‌های خورنده دیگر استفاده نکنید برای تمیز کردن دستگاه از پارچه خشک استفاده کنید.

با جسم آهنی، مسی، تیز و یا بنزین روغن تمیز نشود.

۲. روش نگهداری

زمانی که قصد استفاده از دستگاه را ندارید، آن را در کارتن خود قرار دهید و در مکانی خشک و خنک نگه داری کنید.

به منظور جلوگیری از خرابی، دستگاه را به مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید، آتش و دمای بالا قرار ندهید.

از بنزین، رقیق کننده یا حلال‌های خورنده دیگر استفاده نکنید.

هشدارهای ایمنی مهم

دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آن‌ها باشد. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

۲. محیط استفاده

در محیط مرطوب مانند حمام از محصول استفاده نکنید. چنانچه تغییر دمای ناگهانی در محیط رخ داده باشد از محصول استفاده نکنید.

در محیط غبارآلود و یا با وجود گازهای سمی از محصول استفاده ننمایید.

۳. افرادی که مجاز به استفاده از محصول نیستند:

خانم‌ها در دوران بارداری و یا قانندگی

افرادی که دچار بیماری‌های پوستی و آلوده هستند.

افرادی که پوکی استخوان دارند.

افراد دچار بیماری قلبی و یا کسانی که از وسایل پزشکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می‌کنند.

افرادی که دچار تب شده‌اند.


افرادی که دچار جراحت و یا بیماری در سطح پوست هستند. کودکان زیر ۱۴ سال و یا کسانی که از تعادل روانی برخوردار نیستند بدون وجود یک ناظر مجاز به استفاده از محصولات نیستند.

افرادی که بر طبق تجویز پزشک احتیاج به استراحت دارند و یا کسانی که احساس بیماری می‌کنند.

زمانی که بدن‌تان خیس است از محصول استفاده نکنید. در حالت مستی از دستگاه استفاده نشود.

اگر به تازگی عمل جراحی داشته‌اید با مشورت پزشک از دستگاه استفاده کنید.

نام محصول: مینی ماساژور

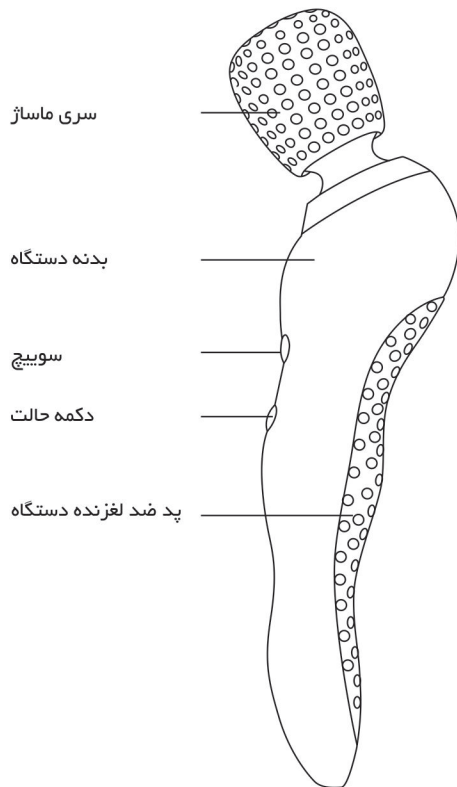

توجه: توضیح در خصوص موارد زیر:

فشار کوتاه یعنی فشار دادن سریع دکمه‌ها، فشار بلند یعنی فشار دادن دکمه‌ها بیش از ۳ ثانیه
دستگاه به شکل پیش فرض در حالت قفل کودک است، باید پیش از استفاده قفل آن را باز کنید.

کلید پاور (🔌)

زمانی که دستگاه خاموش است، اگر فشار کوتاه داشته باشید چراغ دستگاه آبی می‌شود و دستگاه با سرعت کم شروع به کار می‌کند.

زمانی که دستگاه روشن است، اگر فشار کوتاه داشته باشید چراغ خاموش می‌شود و دستگاه خاموش می‌شود.

کلید حالت (🌀)

زمانی که دستگاه روشن است، اگر فشار کوتاه داشته باشید چراغ فلش می‌زند و به رنگ آبی درمی‌آید؛ ۵ حالت وجود دارد که می‌توان به شکل زیر انتخاب کرد.

فشار دادن کلید پاور (🔌) و کلید حالت (🌀) به صورت همزمان

زمانی که دستگاه خاموش است، اگر فشار بلند داشته باشید چراغ فلش می‌زند و یک بار دستگاه می‌لرزد و به حالت قفل سفر در می‌آید.

زمانی که دستگاه در حالت قفل سفر است، اگر فشار بلند داشته باشید چراغ فلش می‌زند و یکبار دستگاه می‌لرزد. حالا قفل سفر غیر فعال است.

روش استفاده

تومیه دوستانه

این محصول دارای یک شارژر حرفه‌ای است که به انتهای محصول وصل می‌شود و آن را شارژ می‌کند. لطفاً از شارژرهای متفرقه استفاده نکنید.



مشخصه‌ها

روش ماساژ: ویبره

نقاط ماساژ گیرنده: گردن، کمر، میان تنه و سایر نقاط نرم بدن


عملکردهای خاص: سیار بدون سیم، ویبره قوی، قفل کودک

زمان اتوماتیک: ۵ دقیقه

متد کنترل: کنترل هوشمند

روش استفاده


راهتمایی دکمه‌ها
خاموش/روشن

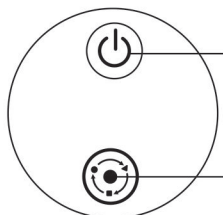

دکمه حالت

شارژ (اگر شارژر دستگاه کافی باشد، می‌توان بدون اتصال به برق از دستگاه استفاده کرد).

شارژر را به انتهای محصول وصل کنید چراغ آن قرمز می‌شود. زمانی که دستگاه کامل شارژ شد، می‌توان پس از قطع کردن شارژر با فشار دادن دکمه پاور از دستگاه استفاده کرد (توجه: به دلایل ایمنی استفاده از دستگاه زمانی که به شارژر وصل است مجاز نمی‌باشد)

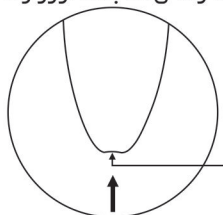

محفظه شارژ

دستورالعمل استفاده

تومیه دوستانه: به منظور اجتناب از به کار افتادن دستگاه در زمان لمس ناخواسته دکمه‌ها، دستگاه مجهز به قفل کودک است، تا زمانی که این قفل فعال باشد هیچ گونه دکمه‌ای فعال نمی‌باشد. برای به کار انداختن دکمه‌ها باید قفل را باز کنید.